




deu

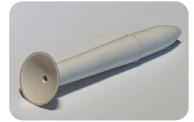

# DMV Magic Touch™

## Für harte und gaspermeable Kontaktlinsen

### Verwendungszweck

Dieses Produkt eignet sich zum Auf- und Absetzen von harten (formstabilen) und gaspermeablen Kontaktlinsen.

### Gebrauchsanweisung

Reinigen Sie den DMV Magic Touch vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**ABSETZEN** – Benetzen Sie die Saugfläche mit Kochsalzlösung. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kontaktlinse zentriert vor der Pupille sitzt. Drücken Sie den Griff des Saugers fest zusammen und führen Sie den Sauger zum Auge. Setzen Sie den Sauger auf die Kontaktlinsenoberfläche, während Sie in den Spiegel sehen. Während der Sauger die Linsenoberfläche berührt reduzieren Sie den Druck auf den Saugergriff, um die Kontaktlinse anzusaugen. Nehmen Sie die Kontaktlinse vom Auge.

Nach dem Absetzen, drücken Sie den Saugergriff wieder zusammen, um die Sogwirkung zu lösen. Jetzt können Sie die Kontaktlinse vom Sauger nehmen.

**AUFSETZEN** – Setzen Sie die benetzte Kontaktlinse auf den Sauger ohne den Saugergriff zusammenzudrücken. Die benetzte Kontaktlinse wird dort haften. Halten Sie den Griff locker zwischen den Fingern ohne Druck auf den Griff auszuüben. Führen Sie den Sauger mit der Kontaktlinse zum Auge und setzen Sie sie vorsichtig in die Mitte der Hornhaut vor die Pupille.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

### Reinigung

Reinigen Sie den DMV Magic Touch nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren sie ihn seinem Behälter auf. Halten Sie den Lufkanal frei von Verunreinigungen. Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.

**Vorsichtsmassnahme:** Falls das Produkt versehentlich die Augenoberfläche berührt und dort haftet, lösen Sie den Druck vom Griff und das Produkt wird sich von der Augenoberfläche lösen. Dieses Produkt bleibt nicht am Auge haften.

**Achtung:** Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.

**Achtung:** Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.

**Achtung:** Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.

Verwenden Sie den DMV Magic Touch **NICHT für weiche Kontaktlinsen und Hybrilinsen**.

Für den Fall, dass Sie einen ersten Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.

### Entsorgung

DMV Corporation empfiehlt, gebrauchte DMV-Produkte gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt	Vor direkter Sonne schützen	Importeur
Nicht über 105°C aufbewahren 220°F	Einzelner Patient - mehrfach anwendbar	Hersteller
Gebrauchsanweisung beachten dmvcorp.com	Herstellungsdatum	Herstellungsland
Bevollmächtigter Vertreter		

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emργο Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emργο Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

