




ita

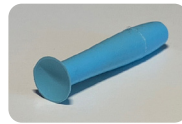

## DMV Ultra™ / DMV 45™

### Per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e gas-permeabili.

#### Utilizzazione

DMV Ultra e DMV 45 sono adatti per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e permeabili al gas. Tenere il DMV Ultra in posizione verticale e il DMV 45 ad un angolo di circa 45°.

#### Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare il DMV Ultra / DMV 45 per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

**RIMUOVERE** – Inumidire la superficie della ventosina del DMV Ultra/DMV 45 con soluzione salina e portarlo verso l'occhio. Assicurarsi che la lente a contatto sia centrata davanti alla pupilla. Posizionare la superficie della ventosina in modo parallelo e centrato sulla superficie della lente a contatto mentre si guarda in uno specchio. Rimuovere la lente a contatto allontanando l'applicatore dall'occhio. Per rimuovere la lente a contatto dalla ventosina tirare la lente a contatto lateralmente dall'applicatore.

**INSERIMENTO** – Posizionare la lente a contatto umida nell'incavo piatto all'estremità più stretta dell'applicatore. La lente a contatto umida resterà attaccata. Portare l'applicatore con la lente a contatto verso l'occhio e posizionarlo con cautela al centro della cornea davanti alla pupilla.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

#### Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Ultra / DMV 45 con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.



**Attenzione:** Se il DMV Ultra / DMV 45 tocca e aderisce accidentalmente alla superficie dell'occhio, premere la maniglia per rilasciare l'aspirazione e rimuovere il prodotto dall'occhio.



**Attenzione:** Tenere la DMV Ultra / DMV 45 lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti



**Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli.** Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.



**Attenzione:** Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.



**N'utilisez pas DMV Ultra / DMV 45 pour les lentilles de contact souples ou hybrides.**

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.

#### Smaltimento dei rifiuti

DMV Corporation consiglia di smaltire i prodotti DMV usati secondo le normative locali in vigore al momento dello smaltimento.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Importatore



Non conservare a temperatura superiore a 105° C / 220° F



Singolo paziente – uso multiplo



Produttore



Seguire le istruzioni per l'uso [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Data di produzione



Paese di Produzione



Rappresentante autorizzato



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

