




ČES

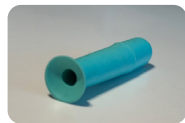

DMV CLASSIC™

Pro tvrdé a plyn propouštějící kontaktní čočky

Zamýšlené použití

Tento nástroj je konstruován k nasazování a vyjímání tvrdých a plyn propouštějících kontaktních čoček.

Návod k použití

Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Vyjmutí – Přisavku navlhčete. Dbejte na to, aby byla kontaktní čočka v oku vycentrována. Stlačte rukojeť nástroje DMV Classic a zaveďte ji do středu kontaktních čoček. Dotkněte se jí přední strany čoček při použití zrcátka. Zatímco se nástroj DMV Classic dotýká čoček, lehce uvolněte tlak působící na rukojeť, což způsobí, že nástroj DMV Classic přilne k čočkám. Kontaktní čočky vyjměte přímo z oka. Po vyjmutí znovu stiskněte rukojeť, aby se uvolnilo sání a čočky vyjměte z přísavky.

Nasazení – Umístěte vlhkou kontaktní čočku na přísavku bez stlačování rukojeti. Vlhké čočky přilnou k přísavce. **NESTLAČUJTE** rukojeť během nasazování čoček. Vložte kontaktní čočku přímo do oka.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokadže po použití nástroje DMV Maxi Cup jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu.

Ve vzduchovém kanálu nesmí být nečistoty. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.

Bezpečnostní opatření: Pokud by náhodně došlo k přilnutí nástroje DMV Classic k oku, sevřete rukojeť, aby se uvolnilo přísátí, a nástroj z oka vyjměte.

Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.

Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.

Upozornění: I když z tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, **že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.**

DMV Classic NEPOUŽÍVEJTE pro MĚKKÉ nebo hybridní kontaktní čočky.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné přehodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.

Likvidace odpadu

Společnost DMV Corporation doporučuje, aby její výrobky byly po použití likvidovány v souladu s místními předpisy platnými v době likvidace.

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem

Chraňte před přímým slunečním světlem

Dovozce

Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F

Jeden pacient – vícenásobné použití

Výrobce

Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com

Datum výroby

Země výroby

Zplnomocněný zástupce

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK