




est

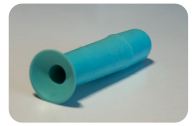

DMV CLASSIC™

Kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede jaoks

Sihotstarve

Seade on mõeldud kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks.

Kasutusjuhend

Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Eemaldamine – Niisutage iminapp. Veenduge, et kontaktlääts oleks silma keskel. Pigistage seadme Classic käepidet ja viige seade kontaktläätsesse keskmee juurde. Puudutage peeglist vaadates kontaktläätsesse esiosa. Hoides seadet Classic jätkuvalt vastu kontaktläätsesse, vähendage veidi käepidemele avaldatavat survet; sellega võimaldada seadmel Classic kontaktläätsesse kinnituda. Eemaldage kontaktlääts otseoliigutusega silmast. Pärast kontaktläätsesse eemaldamist pigistage uuesti käepidet; sellega peatate imamise ja saate kontaktläätsesse iminapalt eemaldada.

Paigaldamine – Asetage niisutatud kontaktlääts iminapale ilma käepidet pigistamata. Niisutatud kontaktlääts kinnitub napale. ÄRGE pigistage käepidet kontaktläätsesse paigaldamise ajal. Asetage kontaktlääts otseoliigutusega silma.

Järgige teile kontaktläätsesse paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme DMV Classic kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. **Hoidke õhukanal prügivaba.** Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.

Ettevaatusabinõud: Kui seade DMV Classic peaks kogemata silma külge kinnituma, pigistage imamise peatamiseks käepidet ja eemaldage seade silmast.

Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldid ja tugevalt oksüdeerivad ained.

Hoiatus: Lämpumisoht. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.

Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit, mis on tuntud allergreen.

ÄRGE kasutage DMV Classic seadet pehmete või hübridsete kontaktläätsede jaoks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.

Jäätmekäitlus

DMV Corporation soovib kasutatud DMV tooted utiliiseerida vastavalt jäätmekäitluse ajal kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

See seade on meditsiiniseade

Hoida otsese päikesevalguse eest

Maaletooja

Hoida temperatuuril kuni 105 °C/220°F

Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks

Tootja

Loe kasutusjuhendit dmvcorp.com

Tootmiskuupäev

Tootja riik

Autoriseeritud esindaja

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA