




gre

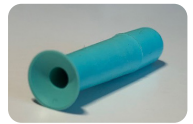

DMV Classic™

Για σκληρούς και αεροδιαπερατούς φακούς επαφής

Ενδεικνυόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκληρών και αεροδιαπερατούς φακών επαφής.

Οδηγίες χρήσης



Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.

Αφαίρεση – Υγράνετε τη βεντούζα. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός επαφής έχει κεντραριστεί στο μάτι. Πιέστε τη λαβή του εφαρμοστή DMV Classic και κατευθυνέτε τον στο κέντρο του φακού επαφής. Αγγίξτε το μπροστινό μέρος του φακού επαφής με τη βεντούζα ενώ κοιτάξετε στον καθρέφτη. Ενώ ο εφαρμοστής DMV Classic ακουμπά τον φακό, μειώστε ελαφρά την πίεση στη λαβή ώστε ο εφαρμοστής DMV Classic να προσκολληθεί στον φακό. Αφαιρέστε τον φακό επαφής απευθείας από το μάτι. Μετά την αφαίρεση, σφίξτε ξανά τη λαβή για να σταματήσει η αναρρόφηση και να απομακρύνετε τον φακό από τη βεντούζα.

Εισαγωγή – Τοποθετήστε τον υγρό φακό επαφής στη βεντούζα χωρίς να σφίγγετε τη λαβή. Ο υγρός φακός θα προσκολληθεί στη βεντούζα. ΜΗ σφίγγετε τη λαβή ενώ εισαγάγετε τον φακό. Τοποθετήστε τον φακό επαφής απευθείας στο μάτι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμιάτρου σας.

Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή DMV Classic, καθαρίζετε τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θήκη του αφού στεγνώσει. **Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στον δίαυλο αέρα.** Φροντίστε να τον αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.



Προφύλαξη: Αν ο εφαρμοστής DMV Classic προσκολληθεί κατά λάθος στο μάτι, σφίξτε τη λαβή για να σταματήσει η αναρρόφηση και αφαιρέστε τον εφαρμοστή από το μάτι.



Προσοχή: Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χεριών, τζελ μαλλιών, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.



Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού. Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νουσούντα ή τραυματισμένα μάτια. Αν εμφανιστεί οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο σας.



Προσοχή: Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, **το προϊόν περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ,** που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.



ΜΗ χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστή DMV Classic για ΜΑΛΑΚΟΥΣ ή υβριδικούς φακούς επαφής.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).

Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Διάθεση αποβλήτων

Η DMV Corporation συνιστά τα χρησιμοποιημένα προϊόντα της DMV να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τον χρόνο απόρριψης.



Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν



Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως



Εισαγωγές



Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 105 °C/220°F



Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή



Κατασκευαστής



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης dmvcorp.com



Ημερομηνία κατασκευής



Χώρα παραγωγής



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Ergemo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Ergemo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

