




gre

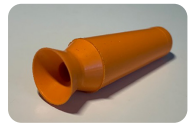

DMV Scleral Cup™

Για σκληρικούς φακούς επαφής και οφθαλμικές προθέσεις

Ενδεικνύομενη χρήση

Ο εφαρμοστής DMV Scleral Cup έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση/αφαίρεση σκληρικών φακών επαφής και για την αφαίρεση τεχνητών σφραγισμάτων.

Οδηγίες χρήσης



Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.

Αφαίρεση – Υγράνετε τη βεντούζα και σφίξτε τη λαβή. Τοποθετήστε τη βεντούζα πάνω στον σκληρικό φακό επαφής χρησιμοποιώντας καθρέφτη. Μειώστε την πίεση στη λαβή ώστε να δημιουργηθεί αναρρόφηση για τη συγκράτηση του φακού επαφής. Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει χειρισμός του φακού επαφής με τρόπο ώστε να επιτραπεί η αφαίρεσή του από το μάτι. Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής σας για τη βέλτιστη τεχνική. Μετά την αφαίρεση, σφίξτε ξανά τη λαβή για να σταματήσει η αναρρόφηση και να απομακρύνετε τον φακό από τη βεντούζα.

Εισαγωγή – Τοποθετήστε τον υγρό φακό επαφής στη βεντούζα χωρίς να σφίγγετε τη λαβή. Ο υγρός φακός θα προσκολληθεί στη βεντούζα. ΜΗ σφίγγετε τη λαβή ενώ εισαγάγετε τον φακό. Τοποθετήστε απαλά τον σκληρικό φακό στο ανοιχτό μάτι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμιάτρου σας.

Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή DMV Scleral Cup, καθαρίζετε τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θήκη του αφού στεγνώσει. **Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στον διάυλο αέρα.** Φροντίστε να τον αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.



Προφύλαξη: Προφύλαξη: Αν ο εφαρμοστής DMV Scleral Cup προσκολληθεί κατά λάθος στο μάτι, σφίξτε ελαφρώς τη λαβή για να σταματήσει η αναρρόφηση και αφαιρέστε τον εφαρμοστή από το μάτι.



Προσοχή: Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χεριών, τζελ μαλλιών, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.



Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού. Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νοσούνια ή τραυματισμένα μάτια. Αν εμφανίσετε οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο, συμβουλευτείτε τον οφθαλμιάτρου σας.



Προσοχή: Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, **το προϊόν περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ,** που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.



ΜΗ χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστή DMV Scleral Cup για ΜΑΛΑΚΟΥΣ ή υβριδικούς φακούς επαφής.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).

Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Διάθεση αποβλήτων

Η DMV Corporation συνιστά τα χρησιμοποιημένα προϊόντα της DMV να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τον χρόνο απόρριψης.



Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν



Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως



Εισαγωγέας



Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 105 °C/220°F



Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή



Κατασκευαστής



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης dmvcorp.com



Ημερομηνία κατασκευής



Χώρα παραγωγής



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

