




nor

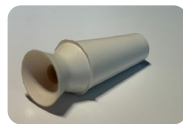

DMV Vented Scleral Cup™

For hybride og sklerale kontaktlinser

Avsedd anvending

DMV Vented Scleral Cup er designet for innsetting av hybride og sklerale kontaktlinser.

Bruksanvisning



Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.

INNSETTING – En luftkanal går gjennom enheten for å deaktivere sug. Dette gjør at en kontaktlinse kan plasseres på øyet uten å feste seg til enheten. Hold enheten loddrett og plasser kontaktlinsen i sugekoppen. Sørg for å fylle linsen med godkjent løsning når du setter inn hybride eller sklerale linser. Løft enheten forsiktig mot det åpne øyet og berør linsen mot øyet ved hjelp av et speil.

Følg anvisningene fra optiker/øyelege.

Rengjøring

Rengjør DMV Vented Scleral Cup etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet etter tørking. Hold luftkanalen fri for rusk. Planlegg å erstatte den hver sjetten måned.



Forholdsregel: Hvis du ved et uhell setter enheten på øyets overflate kan du bare ta den rett ut av øyet ettersom det ikke er noe sug. Unngå å skyve enheten over øyets overflate.



Forsiktig: Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.



Forsiktig: Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



IKKE BRUK denne enheten TIL FJERNING av kontaktlinser.

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.

Avfallshåndtering

DMV Corporation anbefaler å kaste brukte DMV-produkter i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Importør



Oppbevares ved høyst 105 °C / 220 °F



Enkelpasient - flerbruk



Produsent



Les bruksanvisningen
dmvcorp.com



Produksjonsdato



Produksjonsland



Autorisert representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Chens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

