




hun

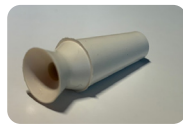

# DMV Vented Scleral Cup™

## Hibrid és szklerális kontaktlencsékhez

### Alkalmazási terület

A DMV Vented Scleral Cup a hibrid és szklerális kontaktlencsék behelyezésére szolgál.

### Használati utasítás



Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

Behelyezés – A szívóhatás megszüntetése céljából egy légcsontra fut át az eszközön. Ez lehetővé teszi, hogy a kontaktlencsét a szemre helyezzük anélkül, hogy az eszközhöz tapadna.

Tartsa az eszközt függőlegesen, és helyezze a kontaktlencsét a tapadókorongra. Hibrid vagy szklerális lencsék behelyezésekor figyeljen arra, hogy mindig töltsze fel a lencsét az engedélyezett oldattal. Óvatosan emelje az eszközt a nyitott szemhez, és egy tűkőr segítségével érintse a lencsét a szemhez.

Kövessené kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

### Tisztítás

A DMV Vented Scleral Cup eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. **Tartsa a légcsontrót szennyeződésektől tisztán.** Félévente cserélje az eszközt.



**Elővigyázatosság:** Ha az eszköz véletlenül a szem felületére kerül, csak húzza le a szemről, mivel nincs szívóhatás. Ne csúsztassa az eszközt a szem felületén.



**Figyelem:** Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrem, hajzsél, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.



**Figyelem: Fulladásveszély.** Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



**Figyelem:** Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, **a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet,** mely ismert allergén.



**NE HASZNÁLJA az eszközt kontaktlencsék ELTÁVOLÍTÁSÁRA.**

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.

### Hulladékok ártalmatlanítása

A DMV Corporation azt javasolja, hogy az elhasznált DMV-termékek ártalmatlanítását az akkor éppen hatályos helyi szabályozások szerint végezzék.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Importőr



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Gyártó



Olvassa el a használati útmutatót. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Gyártás időpontja



A gyártó országa



Meghatalmazott képviselője



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

