




est

DMV Versa™

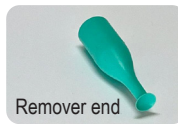

Remover end



Inserter end

Skleraalsete kontaktläätsede paigaldus-/eemaldusseade

Sihotstarve

DMV Versa on mõeldud skleraalsete kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks.

Kasutusjuhend

Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Eemaldamine – Asetage niisutatud skleraalne kontaktlääts Versa laiemale otsale, kuhu kontaktlääts kergelt kinnitub. Hoidke teise käega silmalaugude lahti ja asetage skleraalne kontaktlääts silma. Kui kontaktlääts on silmale kinnitunud, eemaldage DMV Versa. Iminapal olevad sooned loovad kontaktläätsel kõrgema toetuspinna, välistades selle kinnitumist seadmele Versa. Abivahendina kasutage peeglit.

Paigaldamine – Asetage niisutatud skleraalne kontaktlääts Versa laiemale otsale, kuhu kontaktlääts kergelt kinnitub. Hoidke teise käega silmalaugude lahti ja asetage skleraalne kontaktlääts silma. Kui kontaktlääts on silmale kinnitunud, eemaldage DMV Versa. Iminapal olevad sooned loovad kontaktläätsel kõrgema toetuspinna, välistades selle kinnitumist seadmele Versa. Abivahendina kasutage peeglit.

Järgige teile kontaktläätsede paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



Ettevaatusabinõud: Kui DMV Versa väiksem ots (iminapp) peaks kogemata silma külge kinnituma, libistage seda silmanurga suunas ja eemaldage pöörates. Kui DMV Versa suurem ots (tugialus) peaks kogemata silma külge kinnituma, eemaldage see lihtsalt silmast, kuna selles otsas vaakumit ei ole.



Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldid ja tugevalt oksüdeerivad ained.



Hoiatus: Lämpumisoht. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergeen.



ÄRGE kasutage seadet DMV Versa PEHMETE ega hübriidsete kontaktläätsede eemaldamiseks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.

Jäätmekäitlus

DMV Corporation soovib kasutatud DMV tooted utilitseerida vastavalt jäätmekäitluse ajal kehtivatele kohalikele eeskirjadele.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Maaletuoja



Hoida temperatuuril kuni 105 °C/220 °F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Tootja



Loe kasutusjuhendit dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Tootja riik



Autoriseeritud esindaja



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

