




pol

DMV Versa™

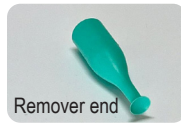

Remover end



Inserter end

Urządzenie do zdejmowania i zakładania skleralnych soczewek kontaktowych

Przeznaczeniem

Urządzenie DMV Versa jest przeznaczone do zakładania i zdejmowania skleralnych soczewek kontaktowych.

Instrukcja użytkownika



Przed pierwszym użyciem należy oczyścić urządzenie 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić je do wyschnięcia.

Wymywanie – Zwilżyć czaszę ssącą (mniejszy koniec) urządzenia DMV Versa roztworem soli fizjologicznej, skierować ją do oka i umieścić na przedniej części skleralnej soczewki kontaktowej blisko krawędzi. Powoli odciągnąć soczewkę od oka. Ta czynność spowoduje zmniejszenie przylegania soczewki i nastąpi jej odłączenie się od oka. Po zdjęciu, ostrożnie ześlizgnąć soczewkę kontaktową do boku czaszy ssącej.

Zakładanie – Ułożyć zwilżoną soczewkę skleralną na większym końcu urządzenia Versa, do którego soczewka lekko przylgnie. Drugą ręką przytrzymać powiekę oka w położeniu otwartym i umieścić soczewkę skleralną na gałce ocznej. Po przylgnięciu soczewki do gałki ocznej, wycofać urządzenie DMV Versa. Prażki w czaszy mają stanowić uniesioną powierzchnię, na której ma spoczywać soczewka i zapobiegać jej przyleganiu do urządzenia Versa. Należy posługiwać się lusterkiem.

Należy przestrzegać wskazówek osoby, która dopasowała soczewkę kontaktową/okulisty.

Czyszczenie

Po każdym użyciu urządzenia należy je oczyścić 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić do wyschnięcia. Po wysuszeniu urządzenie należy przechowywać w jego opakowaniu. Należy je wymieniać co sześć miesięcy.



Środek ostrożności: W razie przypadkowego przyczepienia DMV Versa urządzenia do gałki ocznej mniejszym końcem (czaszą ssącą), należy je przesunąć do kąćka oka i zdjąć, obracając je. W razie przypadkowego przyczepienia DMV Versa urządzenia do gałki ocznej większym końcem (podparciem), należy je po prostu odsunąć od oka, ponieważ na tym końcu nie występuje ssanie.



Przeostroża: Należy unikać kontaktu tego urządzenia z płynami takimi jak krem do rąk, żel do włosów, zmywacz do paznokci oraz silne środki utleniające.



Przeostroża: Ryzyko zadławienia. Należy przechowywać to urządzenie oraz wszelkie inne urządzenia medyczne w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zaleca się stosowania tego produktu w przypadku choroby lub urazu oka. W razie wystąpienia podrażnienia oka, nietypowego upośledzenia wzroku lub bólu, należy się skontaktować z okulistą.



Przeostroża: Nie ma dowodów wskazujących na występowanie reakcji alergicznej po stosowaniu tego produktu, **ale zawiera ono suchy lateks z naturalnej gumy. Nie zawiera płynnego lateksu, który jest alergenem.**



NIE należy używać DMV Versa do zdejmowania MIĘKKICH lub hybrydowych soczewek kontaktowych.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego ze stosowaniem tego urządzenia należy je zgłosić do producenta. Mieszkańcy UE powinni zgłaszać taki incydent do właściwego organu kraju członkowskiego miejsca zamieszkania.

Niniejszy produkt umożliwia osobom noszącym soczewki kontaktowe ich zakładanie i (lub) zdejmowanie w celu stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt jest więc urządzeniem medycznym.

Utylizacja odpadów

Firma DMV Corporation zaleca utylizowanie zużytych produktów DMV zgodnie z miejscowymi przepisami obowiązującymi w czasie dokonywania utylizacji.



Ten produkt jest urządzeniem medycznym



Chronić przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego



Importer



Nie przechowywać w temperaturze powyżej 105°C/220°F



Do wielokrotnego użyciu przez jednego pacjenta



Producent



Należy zapoznać się z instrukcją użytkownika dmvcorp.com



Data produkcji



Kraj produkcji



Upoważniony przedstawiciel



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

