




slk

DMV Versa™



Remover end

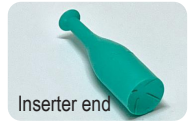

Inserter end

Pomôcka na vyberanie/vkladanie mäkkých kontaktných šošoviek

Účel použitia

DMV Versa je navrhnutý na vkladanie a vyberanie sklerálnych kontaktných šošoviek.

Návod na použitie

Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vyberanie – Navlhčite prísavku. (menší koniec) pomôcky DMV Versa fyziologickým roztokom, zaveďte ju k oku a umiestnite na prednú stranu sklerálnej kontaktnej šošovky, blízko okraja. Pomaly ťahajte šošovku von z oka. Tým sa uvoľní priľnutie šošovky a šošovka sa uvoľní z oka. Po vybratí opatrne stiahnite kontaktnú šošovku bokom z prísavky.

Vkladanie – Položte mokrú sklerálnu šošovku na veľký koniec pomôcky Versa, kde šošovka jemne priľne. Držte viečka otvorené druhou rukou a vložte sklerálnu kontaktnú šošovku do oka. Keď šošovka priľne k oku, odoberte pomôcku DMV Versa. Vrúbky na jamke sú navrhnuté tak, aby poskytovali vyvýšený povrch pre šošovku a zabránili prilepeniu šošovky na pomôcku Versa. Na pomoc použite zrkadlo.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.

Opatrenie: Ak pomôcka DMV Versa nechcete priľne k oku malým koncom (prísavka), posuňte ju do rohu oka a otočením vyberte. Ak pomôcka DMV Versa nechcete priľne k oku veľkým koncom (umiestňovacia podložka), jednoducho ju vyberte z oka, pretože tento koniec sa neprisaje.

Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odľakovač a silné oxidačné látky.

Upozornenie: Riziko udusenía. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojím očným lekárom.

Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex**, ktorý je známym alergénom.

NEpoužívajte DMV Versa na vyberanie MÄKKÝCH alebo hybridných kontaktných šošoviek.

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladať a/alebo vyberať ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

Likvidácia odpadu

Spoločnosť DMV Corporation odporúča likvidovať použité produkty DMV v súlade s miestnymi predpismi platnými v čase likvidácie.

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Dovozca

105°C
Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220°F



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Výrobca

Prečítajte si návod na použitie.
dmvcorp.com



Dátum výroby



Krajina výroby

REP Splnomocnený zástupca

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

